


# MMO 3500

## LUXE VERPLEEGBED MET DRIEDELIGE BEDHEKKEN

ERGONOMISCHE BEDHEKKEN & HUISELIJKE UITSTRALING

Het MMO 3500 bed is een multifunctioneel bed met een uniek centraal beremingsysteem, driedelige deelbare bedhekkken en praktische functies welke steun en veiligheid bieden. De unieke driedelige deelbare bedhekkken kunnen apart van elkaar gebruikt worden. De bedhekkken zijn ontwikkeld om aan beide kanten van het bed steun te bieden bij een transfer. Hierdoor bevordert het de zelfredzaamheid en mobiliteit van de cliënt.

Door middel van één knopsbediening kunt u het bed automatisch in semi-fowlerhouding plaatsen. Vervolgens zal de rugsteunverstelling naar 45 graden gaan en aansluitend zal het bed in stoelstand komen. De unieke terugwaarts glijdende rugsteun vermindert druk- en schuifkrachten in bed.

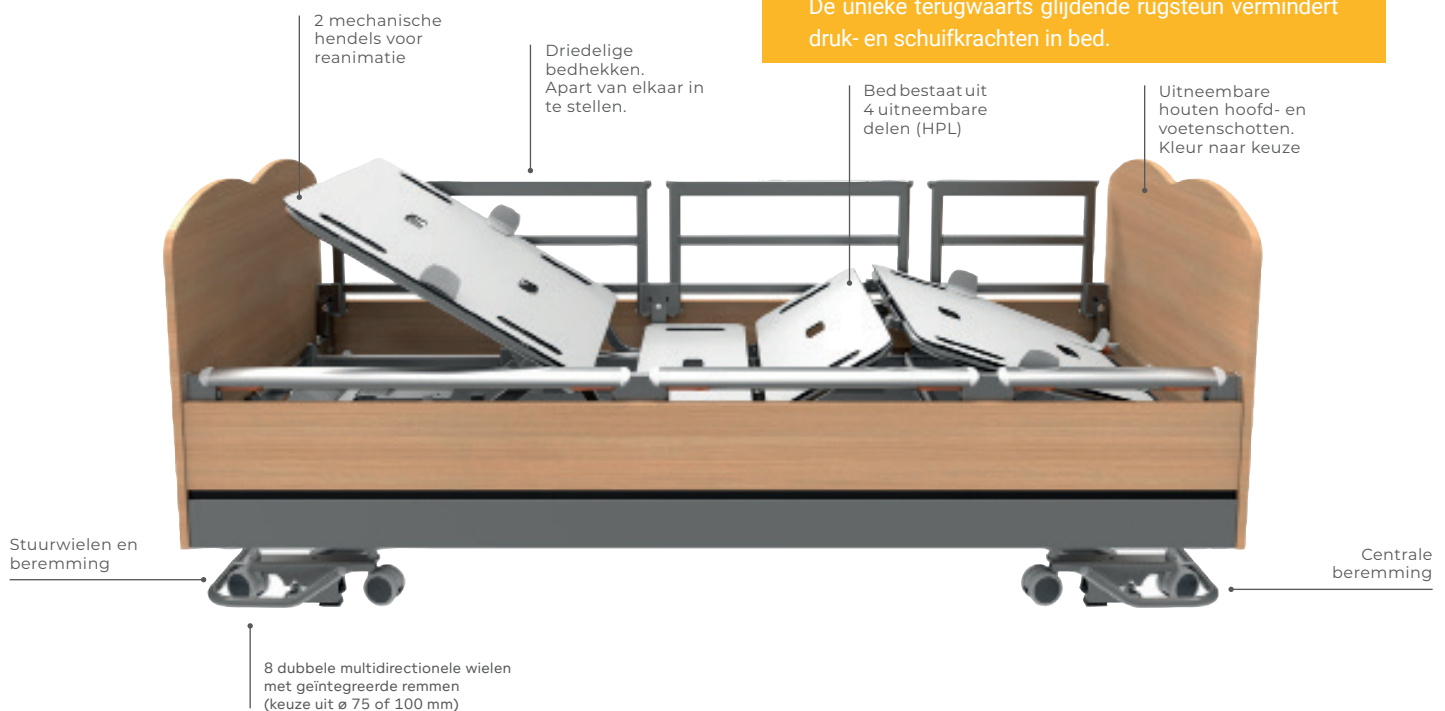

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen ligvlak : 90 x 200 cm en 90 x 215 cm
- Afmetingen bed : 99,8 x 214 cm
- Optioneel geïntegreerde bedverlenging (20 cm)
- Laag/hoogbereik : 19 tot 81 cm
- (anti) Trendelenburg : +/-19°
- Rugsteunverstelling tot 70°, stopt automatisch bij 30° en 45°
- D.m.v. éénknopsbediening in semi-fowlerhouding, zitpositie en stoelstand
- Elektrische bovenbeenverstelling : 30°
- Maximaal gewicht : 250 kg (inclusief matras en toebehoren)

### BASISCONFIGURATIE

- Vlakke noodstand van de rugleuning
- CPR bediening zorgt voor horizontaal ligvlak
- Handbediening met kabel en 5 selecteerbare standen
- Vaststellen individueel gewenste hoogte om in- en uit bed te stappen
- Elektrische hoogterverstelling
- Terugwaarts glijdende rugsteun van 23 cm
- Handmatige onderbeenverhoging (6 standen) tot 20°
- 4 steunen voor infuusstandaard: 2 bij hoofdeind en 2 bij voeteind
- Papegaai links en rechts bij het hoofdeinde te plaatsen
- 8 dubbele zwenkwielen (ø 75 mm) met geïntegreerde remmen
- Diverse kleurstellingen van hoofd- en voetschotten
- De MMO bedden zijn beschikbaar met verschillende typen bedhekkken: deelbare bedhekkken bestaande uit drie delen, doorlopende houten bedhekkken, 1/4 of 3/4 bedhekkken



### COMFORTABEL POSITIONEREN VAN CLIËNTEN

- + Minder druk- en schuifkrachten
- + Makkelijk eten op bed



### VEILIG MOBILISEREN VAN CLIËNTEN

- + Maakt het in- en uitstappen eenvoudiger
- + Vermindert het risico op vallen



### VERZEKERT VAN DUURZAME ZORG

- + Universeel platform welke voldoet aan de wensen van elke zorgomgeving
- + Tijd- en kostenbesparing in bedonderhoud
- + Makkelijk te reinigen

