


# 1 | MMO 8000v

## HOOG-LAAG BED SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OBESE CLIËNT

Het MMO 8000v bed is een multifunctioneel bed met praktische functies, welke essentieel zijn voor het herstel van de obese cliënt en de werkergonomie van de verzorging. Het bed is speciaal ontworpen voor het bieden van maximaal comfort en beschikt over een uniek centraal beremingsysteem. De extra lage stand van het bed biedt optimale veiligheid en geeft preventief bescherming bij vallen. Door middel van één knopsbediening kunt u het bed automatisch in semi-fowlerhouding plaatsen. Vervolgens zal de rugsteunverstelling naar 45° gaan en aansluitend zal het bed in stoelstand komen. De unieke terugwaarts glijdende rugsteun vermindert druk- en schuifkrachten in bed. De 3/4 beddekkers zijn makkelijk uitneembaar.

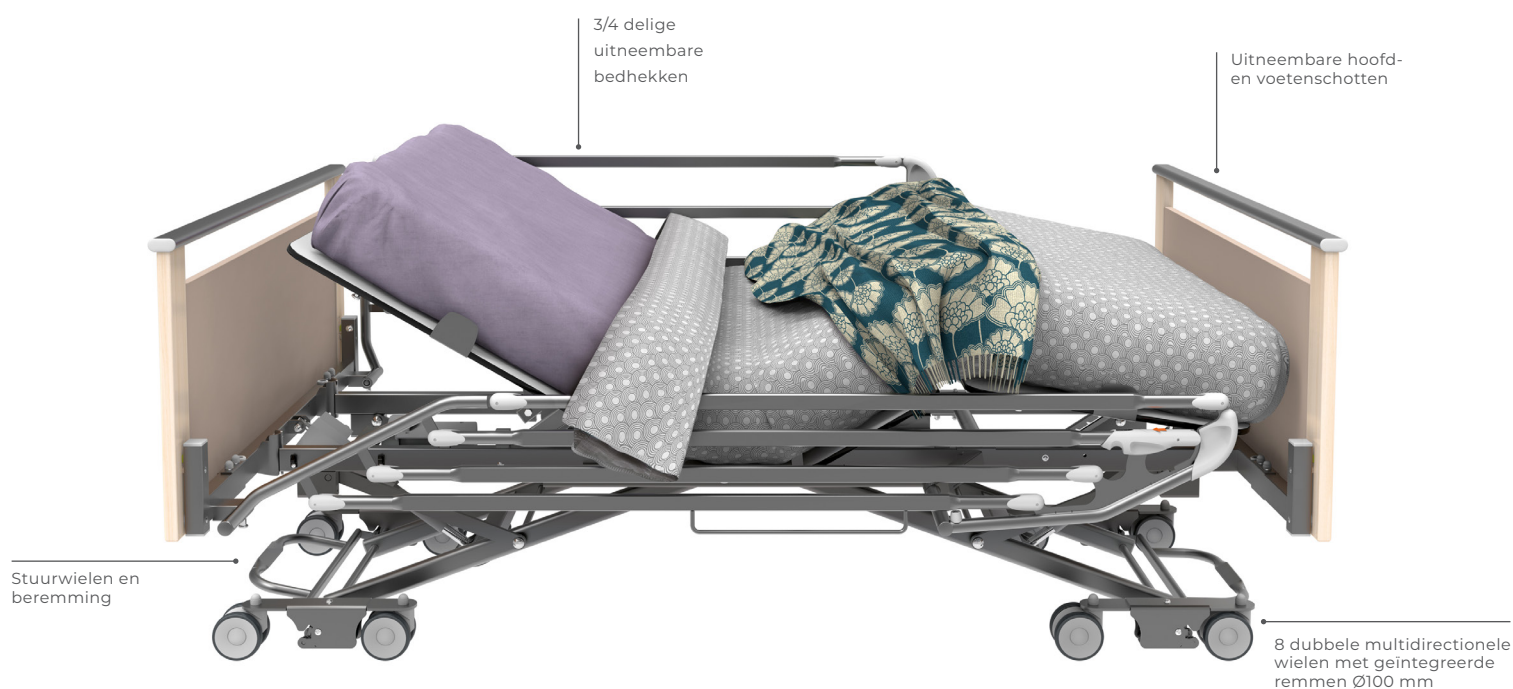

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen ligvlak: 200 x 100/ 110/ 120 cm
- Afmetingen bed: 214 x 115/ 125/ 135 cm
- Optioneel geïntegreerde bedverlenging (20 cm)
- Laag/hoogbereik: 21 tot 83 cm
- (anti) Trendelenburg: +/-14°
- Rugsteunverstelling tot 70°, stopt automatisch bij 30° en 45°.
- D.m.v. éénknopsbediening in semi-fowlerhouding, zitpositie en stoelstand
- Elektrische bovenbeenverstelling: 30°
- Maximaal gewicht : 340 kg (inclusief matras en toebehoren)

### BASISCONFIGURATIE

- Vlakke noodstand van de rugleuning
- CPR bediening zorgt voor horizontaal ligvlak
- Handbediening met kabel en 5 selecteerbare standen
- Vaststellen individueel gewenste hoogte om in- en uit bed te stappen
- Elektrische hoogterverstelling
- Terugwaarts glijdende rugsteun van 23 cm
- Handmatige onderbeenverhoging (6 standen) tot 20°
- 4 steunen voor infuusstandaard: 2 bij hoofdeind en 2 bij voeteind
- Papegaai links en rechts bij het hoofdeinde te plaatsen
- 8 dubbele zwenkwielen (Ø 100 mm) met geïntegreerde remmen
- Diverse kleurstellingen van hoofd- en voetschotten
- De MMO bedden zijn beschikbaar met verschillende typen beddekkers: doorlopende houten beddekkers en 3/4 beddekkers



### VERMINDERT HET RISICO OP VALLEN

- + Ultra lage stand van 21 cm met automatisch remsysteem
- + Makkelijk wendbaar dankzij de 8 multidirectionele wielen
- + In- en uitstaphoogte handmatig instelbaar



### EENVOUDIG EN COMFORTABEL POSITIONEREN EN MOBILISEREN VAN CLIËNTEN

- + Minder druk- en schuifkrachten
- + Makkelijk eten op bed
- + Maakt het in- en uitstappen eenvoudiger



### VERZEKERT VAN DUURZAME ZORG

- + Universeel platform welke voldoet aan de wensen van elke zorgomgeving
- + Tijd- en kostenbesparing in bedonderhoud
- + Makkelijk te reinigen

