


MMO3000 'hotellook'

ULTRA LAAG VALPREVENTIE BED

ULTRALAAG BED MET VELE INSTELMOGELIJKHEDEN

Het MMO 3000 'hotel look' bed is een multifunctioneel bed met praktische functies. Het bed is speciaal ontworpen voor het bieden van maximaal comfort en veiligheid van uw cliënten en beschikt over een uniek centraal beremingsysteem. De extra lage stand van het bed biedt optimale veiligheid en geeft preventief bescherming bij vallen. Door middel van één knopsbediening kunt u het bed automatisch in semi-fowlerhouding plaatsen. Vervolgens zal de rugsteunverstelling naar 45 graden gaan en aansluitend zal het bed in stoelstand komen. De unieke terugwaarts glijdende rugsteun vermindert druk- en schuifkrachten in bed.

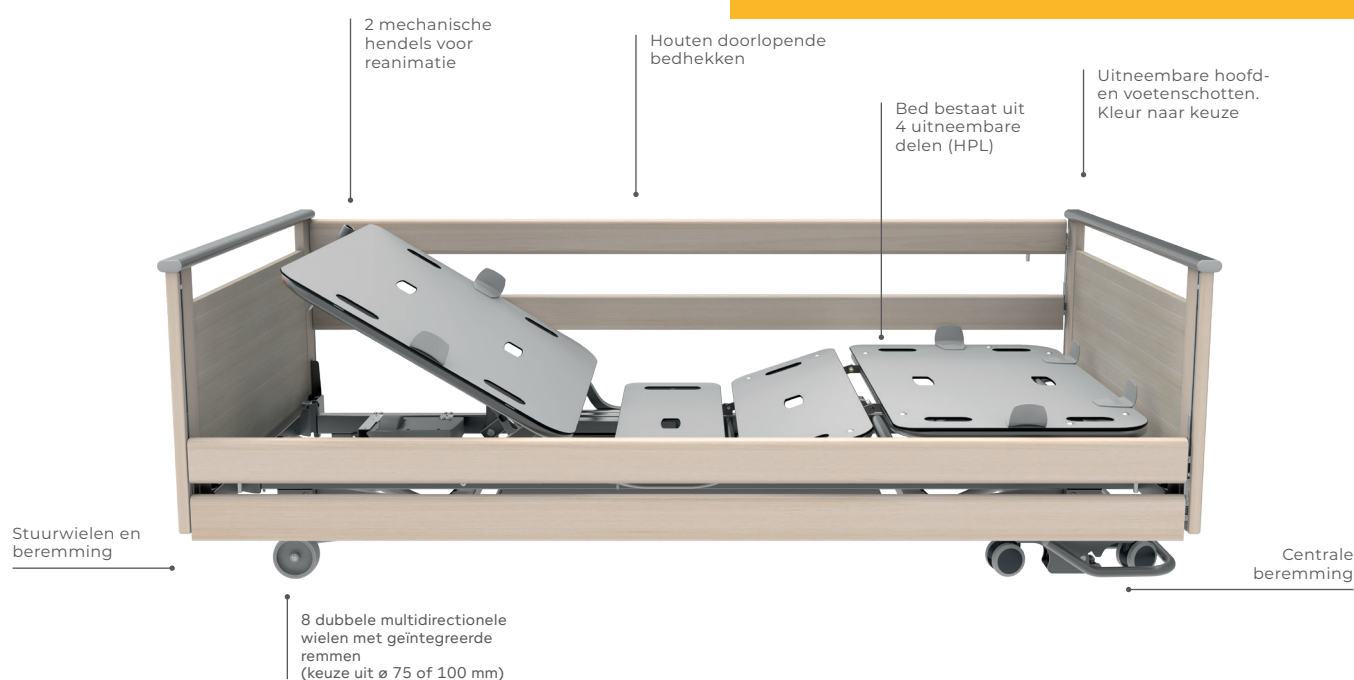

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in model afwijken van het geleverde product.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen ligvlak : 90 x 200 cm en 90 x 215 cm
- Afmetingen bed : 99,8 x 214 cm
- Optioneel geïntegreerde bedverlenging (20 cm)
- Laag/hoogbereik : 19 tot 81 cm
- (anti) Trendelenburg : +/-19°
- Rugsteunverstelling tot 70°, stopt automatisch bij 30° en 45°.
- D.m.v. éénknopsbediening in semi-fowlerhouding, zitpositie en stoelstand
- Elektrische bovenbeenverstelling : 30°
- Maximaal gewicht : 250 kg (inclusief matras en toebehoren)

BASISCONFIGURATIE

- Vlakke noodstand van de rugleuning
- CPR bediening zorgt voor horizontaal ligvlak
- Handbediening met kabel en 5 selecteerbare standen
- Vaststellen individueel gewenste hoogte om in- en uit bed te stappen
- Elektrische hoogteverstelling
- Terugwaarts glijdende rugsteun van 23 cm
- Handmatige onderbeenverhoging (6 standen) tot 20°
- 4 steunen voor infuusstandaard: 2 bij hoofdeind en 2 bij voeteind
- Papegaai links en rechts bij het hoofdeinde te plaatsen
- 8 dubbele zwenkwielen (ø 75 mm) met geïntegreerde remmen
- Diverse kleurstellingen van hoofd- en voetschotten
- De MMO bedden zijn beschikbaar met verschillende typen bedhekken: deelbare bedhekken bestaande uit drie delen, doorlopende houten bedhekken, 1/4 of 3/4 bedhekken



VERMINDERT HET RISICO OP VALLEN

- + Ultra lage stand van 19 cm met automatisch remsysteem
- + In- en uitstaphoogte handmatig instelbaar



EENVOUDIG EN COMFORTABEL POSITIONEREN EN MOBILISEREN VAN CLIËNTEN

- + Minder druk- en schuifkrachten
- + Makkelijk eten op bed
- + Maakt het in- en uitstappen eenvoudiger



VERZEKERT VAN DUURZAME ZORG

- + Universeel platform welke voldoet aan de wensen van elke zorgomgeving
- + Tijd- en kostenbesparing in bedonderhoud
- + Makkelijk te reinigen

