


*Optimale drukverdeling
zorgt voor de juiste
ondersteuning*

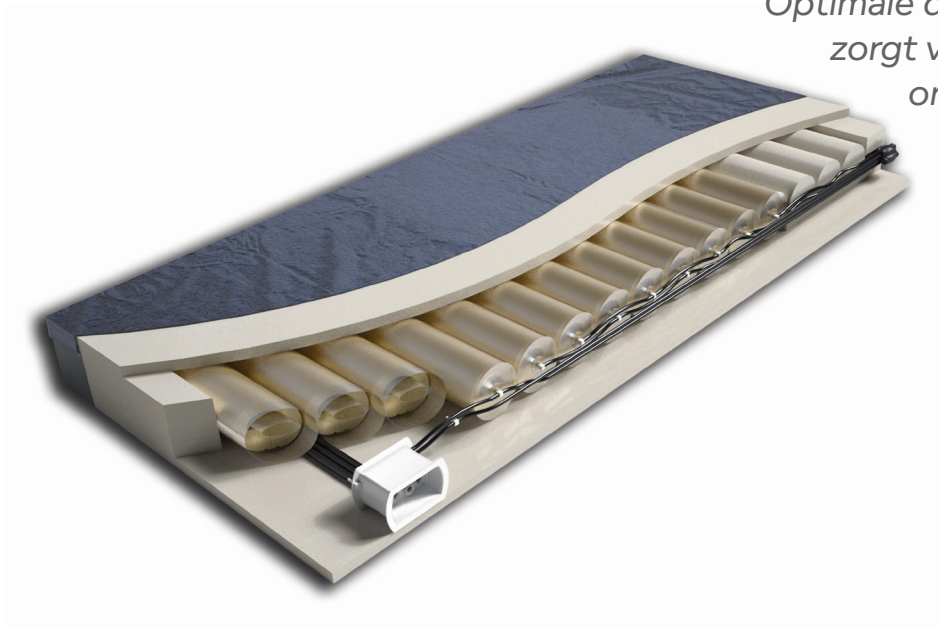

ALGEMEEN

P.R.O. Matt is een matrasvervangend anti-decubitus luchtsysteem, voorzien van de innovatieve P.R.O. technologie (Pressure Redistribution Optimization). Optimale drukverdeling dus.

P.R.O. Matt is zowel mét als zonder Power unit inzetbaar: efficiënte inzet van één systeem ter voorkoming of behandeling van decubitus.

Dankzij de P.R.O. technologie blijven de luchtcellen op druk en geven automatisch de juiste ondersteuning, afgestemd op lichaam, houding en gewicht van de patiënt.

TECHNISCHE GEGEVENS


Breedte	78,85 of 90 cm
Lengte	200 cm lengte (overige afmetingen bespreekbaar)
Hoogte	18 cm
Gewicht	14 kg
Max gebruikersgewicht	227 kg

Dit product is vervaardigd door:

Joerns[®]
HEALTHCARE

BINNENWERK LAGENSYSTEEM

1. Hoofd: statische zone uit schuim met hoge densiteit voor optimale ondersteuning en comfort.
2. Schouder- romp- en hielzones zijn opgebouwd uit gecombineerde
3. luchtcellen. Elke zone past zich automatisch aan om het lichaam van de patiënt optimaal te ondersteunen en drukverdeling te bieden. De hielzone biedt extra drukontlasting.
4. Topper uit visco-elastisch schuim voor optimalisering van comfort.
5. Stevige stabilisatierand rondom voor betere mobilisatie en veiligheid van de patiënt.
6. P.R.O. technische constructie houdt elke zone automatisch op juiste druk bij elke houding van de patiënt.
7. Hoes is speciaal ontwikkeld om optimaal comfort te bieden en de huid van de patiënt te beschermen: vocht- en vlekbestendig, coating met anti-bacteriële werking. Verkrijgbaar: gladde nylon hoes of bi-stretch Dartex uitvoering.
8. Stroeve onderkant houdt matras op zijn plaats, dit betekent minder schuiven en minder valgevaar. P.R.O. Matt is toepasbaar op ieder gewenst bedframe.

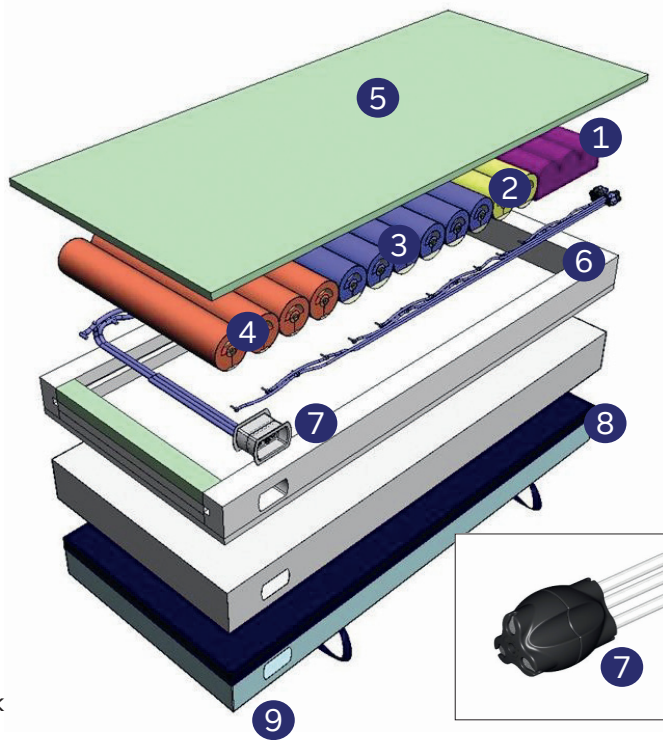

P.R.O. technologie

Actieve drukontlasting zonder een Power unit te gebruiken.

- geen slangen aan buitenkant matras
- geen stroomverbruik
- geen gewichtsinstelling
- geen instelling door verzorgende vereist
- geen storingen of gebruikersfouten

Gebruiksvriendelijk

- Reiniging en reanimatie: procedures gelijk als bij basismatras.
- P.R.O. Matt vult de cellen automatisch weer op druk in elke luchtzone (schouder, romp, hiel)
- Handmatige instelling is niet nodig